



Postavljanje RFID i Vizuelnih ušnih markica

UPUTSTVO

RFID UŠNE MARKICE ZA GOVEDA

1  Proverite da li je crni adapter uklonjen iz čeljusti aplikatora.

2  RFID ušna markica

RFID markica je sa prednje strane ispučena, gde je štampa, a sa zadnje strane je ravna. Pritiskom na metalnu klipsu otvorite čeljust za markice i zatim postavite markicu tako da je ispučenje okrenuto nadole. Greške u ovoj fazi mogu dovesti do oštećenja RFID ušne markice.


Ispučenje je usmereno ka spolja

3  Muški deo navucite na metalnu uglu aplikatora do kraja.

4 Potopite čeljust aplikatora sa markicama u rastvor dezinficijensa.

NB: Dezinficijens koristite u propisanoj koncentraciji zbog moguće iritacije tkiva.


NB: Ispravan i pripremljen aplikator se koristi kod postavljanja RFID ušnih markica.




5  +RFID markica

Pravilno pozicionirana markica se postavlja ujednačenom silom. RFID ušna markica treba da bude postavljena u sredini prve trećine uveta.

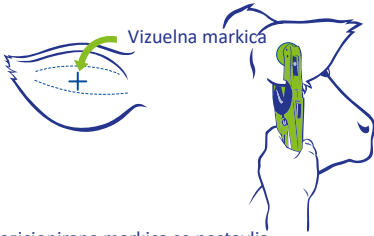
RFID ušna markica se uvek postavlja u unutrašnju stranu uveta.



1  Proverite da li je crni adapter postavljen u čeljusti aplikatora.

2  Postavite vizuelnu ušnu markicu otvaranjem čeljusti za markicu. Preporuka je da se uvo povuče i rastegne u stranu pre postavljanja ušne markice.

3  Muški deo navucite na metalnu uglu aplikatora do kraja.

5  Vizuelna markica

Pravilno pozicionirana markica se postavlja ujednačenom silom. Ženski deo ušne markice, sa ispučenjem se uvek postavlja u unutrašnju stranu uveta a muški deo na spoljašnju.

VIZUELNE I RFID UŠNE MARKICE ZA OVCE I SVINJE



Univerzalni aplikator

Univerzalni aplikator plus

Kontaktirajte ovlaštenog Allflex predstavnika
za detaljne informacije

dr vet.med. spec.Vesna Stojićević Pantelić

062.40.40.05

dr vet.med. Vladimir Krstić

063.40.40.05

www.greenlab-serbia.com



Identify the Difference

